




PORTATA
CARRYING CAPACITY
PORTEE'
CAPACIDAD



Similpelle: solo colore blu "Blue Comfort" 4975
Leatherette: colour blue "Blue Comfort" 4975 only
Similcuir : couleur bleu "Blue Comfort" 4975 uniquement
Cuero sintético : solo color azul "Blue Comfort" 4975

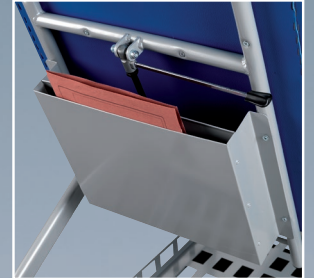

T5000 SEDIA A ROTELLE

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale regolabile tramite pompa a gas.
Poggiagambe regolabile manualmente.
Poggiapiedi in metallo estraibile manualmente.
Braccioli con snodi, regolabili manualmente in altezza.
Imbottitura in schiuma poliuretana ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.
Copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.
Maniglia di spinta posteriore.
Ingombro materasso: 170x55 cm.
Altezza da suolo a seduta: 56 cm.
Quattro ruote diam. 100 mm, di cui 2 direzionabili e 2 con freno.
Fornito con supporto portacartelle e vassoio portacoperte completo di cinghie per fissaggio bombola ossigeno.

Optional (prezzo a richiesta):
M600631 Piantana con morsetto



T5000 WHEEL CHAIR

Structure made of epoxy painted steel tube.
Backrest adjustable by gas pump.
Legrest manually adjustable.
Metal footrest manually extractable.
Armrests with articulations, manually adjustable in height.
Padding made of high density polyurethane foam, fireproof class 1 IM.
Covering made of washable, fireproof, plastic material (leatherette) - fireproof class 1 IM.
Back push handle.
Mattress overall dimensions: 170x55 cm.
Height from floor to seat: 56 cm.
Four wheels diam. 100 mm, 2 of which are directional and 2 with brake.
Supplied with chart holder support and blanket tray complete with fixing belts to fix oxygen bottle.

Additional (price on demand):
M600631 IV pole with clamp.



T5000 FAUTEUIL ROULANT

Structure en tube d'acier verni époxy.
Dossier réglable par pompe à gaz.
Repose jambes réglable manuellement.
Appui pieds en métal extractible manuellement.
Repose bras avec articulations, réglables manuellement en hauteur.
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 1 IM.
Couverture en matériel plastique lavable (Skai) - ignifuge classe 1 IM.
Main courante postérieure pour le déplacement.
Encombrement du matelas: 170x55 cm.
Hauteur du sol au siège: 56 cm.
Quatre roues diam. 100 mm, dont 2 directionnelles et 2 avec frein.
Fourni avec support porte-documents et plateau pour couvertures équipé de courroies de fixation pour assurer la bouteille oxygène.

Options (prix sur demande):
M600631 Porte sérum avec étai.



T5000 SILLA DE RUEDAS

Estructura hecha de tubo de acero pintado epoxi.
Respaldo ajustable mediante bomba a gas. Reposapiernas regulable manualmente. Reposapiés de metalo extractible manualmente. Apoyabrazos con las articulaciones, ajustable manualmente en altura.
Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad y ignifugo classe 1 IM. Cubertura en material plástico (skai) lavable y ignifugo classe 1 IM.
Manija de empuje, trasera.
Medidas externas del colchón: 170x55 cm.
Altura desde el suelo al asiento: 56 cm.
Quatro ruedas diam. 100 mm, 2 de las cuales son direccionales y 2 con freno.
Dotado de soporte para portahistorial y bandeja porta mantos con correas para asegurar el tanque de oxígeno.

Accesorios (si solicitados):
M600631 Portasuero completo de abrazadera

BLUE
COMFORT

