


NEW



M600485/G4

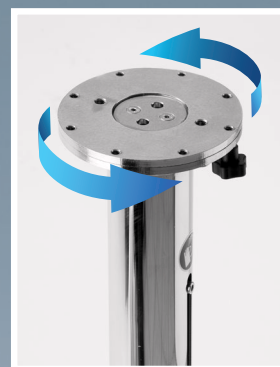

M600485/G5



M600485/G4

TAVOLO DI MAYO OLEODINAMICO

Telaio e vassoio asportabile in acciaio inossidabile.

Base in alluminio appesantita con zavorre - a 4 razze con ruote diam. 50mm
Possibilità di ruotare il vassoio a 360° ad ogni altezza tramite il fissaggio di un volantino allo snodo di roteazione.
Altezza regolabile da 90 a 120 cm con pompa oleodinamica azionata a pedale.
Dimensioni del vassoio: 70x45x1,7h cm.



M600485/G4

HYDRAULIC MAYO TABLE

Frame and removable tray made of stainless steel.

Aluminium base weighted with ballasts - 4 spokes base with castors diam. 50mm.
Possibility to rotate the tray 360° at any height by fixing a handwheel to the rotation joint.
Adjustable height from 90 to 120 cm by means of a hydraulic foot pump.
Tray Dimensions: 70x45x1,7h cm.



M600485/G4

TABLE DE MAYO HYDRAULIQUE

Structure et plateau amovible en acier inoxydable.

Base en aluminium lestée avec des ballasts - à 4 branches avec roulettes diam. 50mm
Possibilité de faire pivoter le plateau à 360° à n'importe quelle hauteur en fixant un volant sur le joint de rotation.
Hauteur réglable de 90 à 120 cm avec pompe hydraulique actionnée par une pédale.
Dimensions du plateau: 70x45x1,7h cm.



M600485/G4

MESA DE MAYO CON BOMBA HIDRAULICA

Estructura y bandeja estampada y desprendible de acero inoxidable.

Base de aluminio 4 ramas lastrada con contrapesos - ruedas diam. 50 mm
Posibilidad de girar la bandeja 360° a cualquier altura mediante la fijación de un volante al nudo de rotación
Altura regulable de 90 a 120 cm con bomba hidraulica de acero cromado a pedal.
Medidas de la bandeja: 70x45x1,7h cm.

M600485/G5

TAVOLO DI MAYO OLEODINAMICO

Telaio e vassoio asportabile in acciaio inossidabile.

Base in acciaio inossidabile appesantita con zavorre - a 5 razze con ruote diam. 50mm
Possibilità di ruotare il vassoio a 360° ad ogni altezza tramite il fissaggio di un volantino allo snodo di roteazione.
Altezza regolabile da 90 a 120 cm con pompa oleodinamica azionata a pedale.
Dimensioni del vassoio: 70x45x1,7h cm.

M600485/G5

HYDRAULIC MAYO TABLE

Frame and removable tray made of stainless steel.

Stainless steel base weighted with ballasts - 5 spokes base with castors diam. 50mm
Possibility to rotate the tray 360° at any height by fixing a handwheel to the rotation joint.
Adjustable height from 90 to 120 cm by means of a hydraulic foot pump.
Tray Dimensions: 70x45x1,7h cm.

M600485/G5

TABLE DE MAYO HYDRAULIQUE

Structure et plateau amovible en acier inoxydable.

Base en acier inoxydable lestée avec des ballasts - à 5 branches avec roulettes diam. 50mm
Possibilité de faire pivoter le plateau à 360° à n'importe quelle hauteur en fixant un volant sur le joint de rotation.
Hauteur réglable de 90 à 120 cm avec pompe hydraulique actionnée par une pédale.
Dimensions du plateau: 70x45x1,7h cm.

M600485/G5

MESA DE MAYO CON BOMBA HIDRAULICA

Estructura y bandeja estampada y desprendible de acero inoxidable.

Base de acero inoxidable 5 ramas lastrada con contrapesos - ruedas diam. 50 mm
Posibilidad de girar la bandeja 360° a cualquier altura mediante la fijación de un volante al nudo de rotación
Altura regulable de 90 a 120 cm con bomba hidraulica de acero cromado a pedal.
Medidas de la bandeja: 70x45x1,7h cm.

